

Versões dos controles



Controle de massagem

1. Display

Indicador das funcionalidades

2. Liga desliga

Ao pressionar o botão liga o display ascenderá indicando todo o status de funcionamento do sistema. (na mesma tecla seleccione o tempo de 15/30/45 minutos) Se acionado novamente desligará.

3. Função

Ao ligar o aparelho, ele funcionará de modo automático variando as funções a cada 36 segundos, ao acionar a tecla função o led do automático desligará indicando que o aparelho estará no modo manual, funcionará de acordo com a função selecionada.

4. Pontos

Essa tecla serve para selecionar os pontos de massagem de acordo com a escolha desejada.

5. Potência

Pressionando a tecla aparecerá no display o número indicando a potência, através da mesma tecla seleccione o nível de 1 a 5.

6. Lados

Ajuste o lado da massagem (disponível apenas para colchão de casal)

E – Lado esquerdo ligado

D – Lado direito ligado

E + D = Esquerdo e direito ligado

7. Bio

Ao pressionar a tecla Bio a energia Bioquântica será ligada.


Essa função poderá ser acionada mesmo com o controle desligado e desligará automaticamente em 12 horas

8. Leds indicativos


Indica o ponto e modo de massagem que está sendo aplicado (Obs.: Ponto 1 cabeça, Ponto 2 tronco, Ponto 3 membros e Ponto 4 pés)

9. Cromoterapia

Acione a tecla Cromoterapia para ligar o sistema de iluminação, com a seta para direita seleccione uma das 12 cores disponíveis ou uma das 4 funções automáticas que emitirá seqüências diferentes de todas as cores. A função Cromo poderá ser acionada mesmo com o controle desligado e desligará automaticamente em 12 horas.

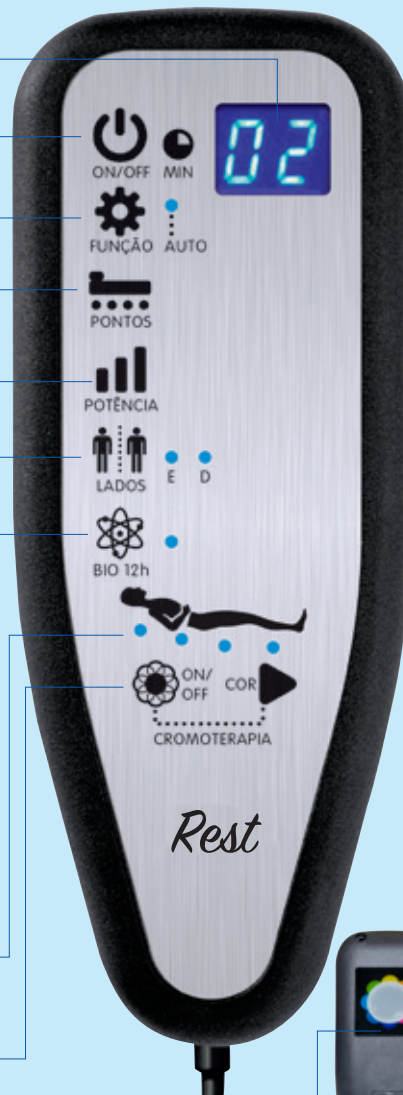

Pontos de massagem:

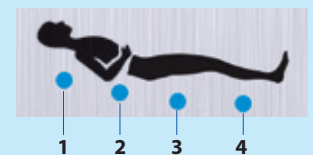

Opções de ponto de massagem

Opção 1
Somente o ponto 1 ligado

Opção 2
Somente o ponto 2 ligado

Opção 3
Somente o ponto 3 ligado

Opção 4
Somente o ponto 4 ligado

Opção 5
Ponto 1 e 4 ligados

Opção 6
Ponto 2 e 4 ligados

Opção 7
Ponto 1 e 3 ligados

Opção 8
Todos os pontos ligados

Sistema de iluminação da Cromoterapia no verso do controle

Kit de massagem com controle digital

Terapias

Massagem Eletrônica: São Vibrações eletromagnéticas emitidas em modo de onda, pulso ou contínuo, distribuídas através de sensores eletrônicos com frequência e intensidade de vibrações acionadas por controle remoto com fio. Esse aparelho foi projetado conforme estrutura de pontos de acupuntura muscular, permitindo 25 tipos diferentes de massagem em todo corpo quando estiver deitado. Pesquisas da medicina moderna demonstram que esse tipo de massagem pode proporcionar uma melhora no relaxamento dos músculos e na circulação sanguínea, aumentando a função de oxigenação. Pode ajudar na remoção das células mortas da superfície cutânea, contribuindo com o brilho e a elasticidade da pele.

Bio: As células do corpo humano são compostas por um núcleo atômico e elétrons, é como se formassem uma central elétrica individual. ... A Energia Bioquântica é a rádio frequência de baixa intensidade, revitalizando as células e auxiliando a evitar doenças.

Cromo: A cromoterapia é a utilização das cores para disfunções orgânicas e emocionais. Os adeptos da cromoterapia entendem que cada cor possui uma vibração específica e uma capacidade terapêutica. O uso da cromoterapia diminui o cansaço físico, proporciona sensação de bem-estar, estimula o sistema nervoso central e melhora a qualidade do sono.

Para que serve cada cor

Na cromoterapia cada cor tem um propósito diferente, sendo utilizadas nas seguintes situações:

Vermelho - O vermelho é uma cor primária com propriedades estimulantes que, quando usado convenientemente, ativa os 5 sentidos, o sistema nervoso central, o fígado e contribui para a produção saudável de glóbulos vermelhos e hemoglobina.

Laranja - O laranja é uma cor que deriva da junção entre o amarelo e o vermelho e aumenta a energia dos pulmões e do estômago, auxiliando também no tratamento das náuseas. Pode aumentar a pulsação, estimular a tireoide e o crescimento dos ossos, produzindo energia que se espalha pelo corpo.

Amarelo - O amarelo é uma cor que tonifica os músculos, ativa os gânglios linfáticos e melhora o sistema digestivo, estimulando os intestinos, pâncreas e os fluidos digestivos. É considerado purificante e quando usado devidamente, ajuda a remover toxinas e parasitas do trato digestivo. Além disso, também contribui para a eliminação de imperfeições da pele e age como um purificador do sangue. A cor amarela pode ainda ajudar a melhorar estados de depressão, apatia e desânimo.

Verde - O verde é a cor mais abundante no planeta, presente na vegetação e contribui para o alívio da tensão, equilibrando o cérebro e estimulando a glândula pituitária, que controla todas as outras glândulas do corpo. É uma cor estabilizadora das disfunções crônicas e agudas, e é a mais usada para aliviar gripes e resfriados e tratar infecções.

Azul - O azul ajuda a eliminar as toxinas através da respiração, estimulando poderes intuitivos e construindo vitalidade. Além disso, alivia a irritação, coceira e a dor de afeções cutâneas, alivia a febre e a inflamação e ativa a glândula pineal.

Violeta - O violeta contribui para o controle da fome, por interferir no metabolismo, ajuda a acalmar os órgãos do organismo, relaxar os músculos, incluindo o coração, e ajuda a combater infecções. Também contribui para a purificação do sangue, e é um calmante usado em meditação, no sono e para aliviar a dor.

Obs: Além das cores descritas no manual o controle proporciona mais 6 combinações de tons, criando uma variedade de opções ao usuário.

Discriminação das 25 funções de massagem

1 – Massagem contínua suave com todos os pontos ligados, indicada para relaxar.

2 – Massagem pulso forte em todos os pontos, trabalha na tonificação e fortalecimento da musculatura.

3 – Massagem pulso forte em todos os pontos em frequência acelerada, complementando a função 2

4 – Massagem em onda iniciando do ponto 1 passando pelos pontos 2 e 3 até o ponto 4, retorna desligando os pontos no sentido contrário, indicada para ativar a circulação.

5 – Complementa a função 4 invertendo a sequência e os pontos de massagem.

6 – Massagem em onda, se desloca do ponto 1 ao ponto 4 e retorna em sentido contrário do ponto 4 ao ponto 1, simulando uma massagem com rolo.

7 – Massagem com deslocamento entre todos os pontos com variação negativa de intensidade e em sequência partindo do ponto 1 ao ponto 4. Ótimo para prática de relaxamento e concentração.

8 – Massagem oscilatória em forma de senoide com deslocamento do ponto 1 ao 4. Muito boa para relaxar.

9 – Massagem oscila em forma de rampa, partindo do ponto 4 até o ponto 1, é uma massagem de ação muito profunda, agindo no sistema linfático.

10 – Massagem composta de variação de pulso com início, nos pontos 1 e 3 alternando com os pontos 2 e 4, causando sensação de bem-estar.

11 – Massagem composta de pulso ao mesmo tempo nos pontos 1 e 3 alternando com os pontos 2 e 4.

12 – Alterna massagem potente dos pontos 1 e 4 para os pontos 2 e 3, pulsando das pontas para o centro, utilizada para aliviar dores lombares.

13 – Massagem frenética em intensidade forte, trabalha todos os pontos indicada para estimular a endorfina.

14 – Massagem de impacto inicia todos os pontos diminuindo a intensidade até desligar.

15 – Massagem intermitente em todos os pontos.

16 – Alternância entre os pontos 1 e 2 depois 3 e 4 variando a intensidade do máximo ao mínimo, é uma massagem de ação completa, passando de superficial a moderada e profunda, ótimo para relaxar.

17 – Modo de massagem semelhante a função 16 com sequência de pontos invertidos.

18 – Complementa as funções 16 e 17 unificando o modo de massagem.

19 – Massagem intensa com vibração forte em todos os pontos desligando dois pontos alternadamente, tem ação revitalizante.

20 – Massagem oscilatória inicia no ponto 2 e 3 expande para o ponto 1 e 4 quando atinge a potência máxima reduz a intensidade até desligar na mesma sequência. É uma massagem de ação calmante.

21 – Massagem contínua com máxima potência, variando a intensidade entre todos os pontos um por vez.

22 – Alterna entre ligado e desligado os pontos 1 e 4 com os pontos 2 e 3 é uma massagem de impacto.

23 – Essa massagem aplica o modo pulso, contínuo e onda na mesma função em todos os pontos. Trabalha relaxamento estimulação de circulação

24 – Massagem inicia ligando um ponto a cada vez iniciando do ponto 1 ao ponto 4. Após todos os pontos ligados inicia o modo de pulso um ponto por vez.

25 – Massagem contínua em todos os pontos, com deslocamento ponto por ponto com massagem de pulso, essa função estimula a circulação e relaxa a musculatura.